

Bioclínicos



CATÁLOGO

Sistema Fraxx Dermatología- Cirugía
Plástica Y Oftalmología



FRAXX SYSTEM

Alta Frecuencia Fraccionada Micro Ablativa

Calidad - Precisión - Seguridad - Experiencia

**SOLUCIÓN
COMPLETA!**

4 MHz
Alta Frecuencia



CE
0086

LOKTAL
MEDICAL ELECTRONICS


WAVETRONIC 6000 TOUCH

Wavetronic 6000 Touch es un bisturí de alta frecuencia que produce un efecto en el tejido biológico similar a la tecnología láser, suave, sin trauma, de corte y coagulación precisos en los tejidos, a través de la energía electromagnética en la frecuencia de Mega Hertz (MHz).


El calor lateral generado en los tejidos adyacentes, en la banda de megahertz es mucho menor que el generado en la banda de kilohertz (kHz), baja frecuencia.

Los tejidos adyacentes no sufren daños térmicos y las excisiones resultan en piezas con calidad para exámenes histológicos, como los realizados con lámina fría.

El uso de la Alta Frecuencia proporciona una excelente calidad de incisión con discreto sangrado, rápida cicatrización, disminución de las cicatrices hipertróficas, postoperatorio con mínima incomodidad y el máximo en resultados estéticos.

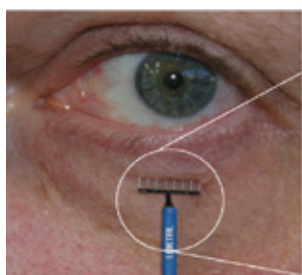


Electrodo
Multiaguja LIMA 8® 2mm.

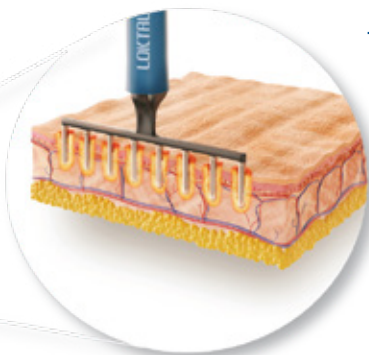

- Lápiz Electroquirúrgico
- Electrodo Multiaguja LIMA 8®.



Electrodo Multiaguja LIMA 8® 2mm.

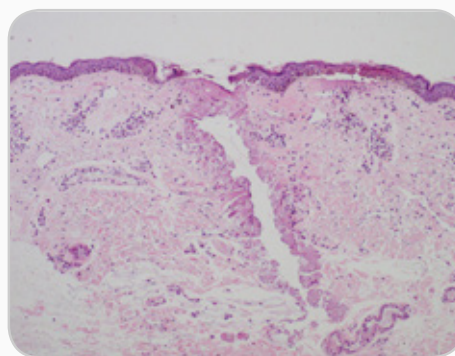

Aspecto Microscópico - Multiaguja.

Ventajas

Tratamiento: de acuerdo con cada tipo de tejido, existen diferentes ajustes de profundidad con una navegación precisa del nivel de energía.

Riesgos reducidos, recuperación rápida, efectos secundarios mínimos: con pequeñas restricciones fotográficas, debido a la tecnología única "Dual Deep Power Energy", una posibilidad de hiperpigmentación muy baja en comparación con el tratamiento con láser.

Dermatología · Cirugía Plástica · Oftalmología

El sistema HF FRAXX con exclusivo control de disparo fraccionado randómico "SmartShot", utiliza la tecnología de alta frecuencia (AF), que distribuye energía subablativa de forma precisa, con significativo impacto en la dermis y mínimo daño en la epidermis. Con esta característica única de distribución de energía aleatoria, llamada "SmartShot" el MEGAPULSE HF FRAXX proporciona un efecto perfecto, conocido como tiempo de relajación, lo que mantiene el tejido adyacente a los micropuntos vaporizados, completamente intacto y sano para la formación de **Neocolagénesis**.

Su efecto es la promoción de la regeneración en la dermis al nivel de la interfaz papilar con reticular, a través de la estimulación de fibroblastos con consecuente síntesis de colágeno y fibras elásticas, así como regeneración epidérmica, dada por la migración de queratinocitos.

Rejuvenecimiento y Efecto Tightening: El rejuvenecimiento de la piel, se da por la contracción del colágeno y la renovación de queratinocitos.


No Hay Formación de Costras Gigantes: Al contrario de la dermo abrasión y peeling profundos, la radiofrecuencia micro fraccionada produce micro costras, que se disminuye en el área tratada y recuperación entre cinco a siete días después del tratamiento.

Mínimo Down Time (Tiempo de Recuperación): La recuperación es rápida, permitiendo que el paciente regrese a sus actividades diarias casi inmediatamente.

- Electrodo Fraccionado de 64 puntas.




Blefaroplastia con Wavetronic 6000 Touch.

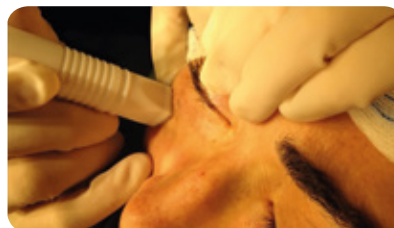


Blefaroplastia + FRAXX.



Aspecto Posoperatorio Inmediato.

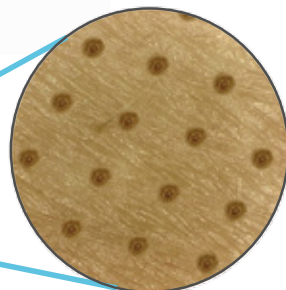

Aspecto de los Puntos 200x.

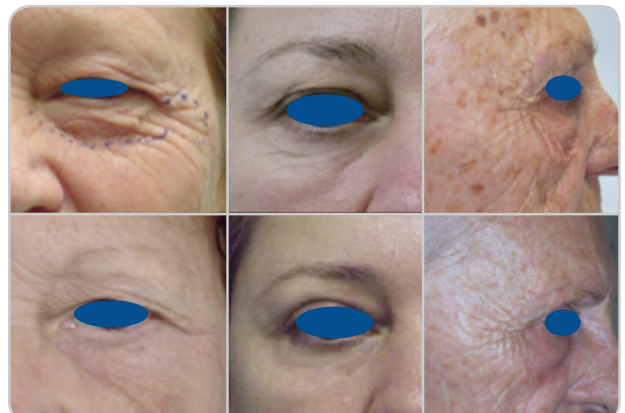

ELECTRODOS

Dermatología · Cirugía Plástica · Oftalmología

★ ACEL0139

Electrodo Electroquirúrgico Bola Ø 3mm, Recto.
Para Coagulación y Vaporización.



★ ACEL0140

Electrodo Electroquirúrgico Argolla Ø 5mm, Recto.
Para biopsia xéresis de lesiones.



★ ACEL0141

Electrodo Electroquirúrgico Universal de Corte,
Profundidad Ajustable, (sustituye la lámina).



★ ACEL0142

Electrodo Electroquirúrgico Argolla, Ø 7mm, Recto.
Para biopsia y exéresis de lesiones



★ ACEL0143

Electrodo Electroquirúrgico Argolla, Ø 12mm, Recto.
Para biopsia y exéresis de lesiones.



★ ACEL0144

Electrodo Electroquirúrgico Argolla Triangular, 9mm x
9mm x 9mm, Recto. Para biopsia y exéresis de lesiones
(shaving)



★ ACEL0145

Electrodo Electroquirúrgico Argolla cuadrada 10mm x
10mm, Reto. Para biopsia y exéresis de lesiones.



★ Acompañan el Kit de 7 Electrodo.

Electrodos Multiaguja LIMA

ACEL1460 - Electrodo Multiaguja LIMA 8@
Longitud de la aguja 1 mm.



ACEL1456 - Electrodo Multiaguja LIMA 8@
Longitud de la aguja 2 mm.



ACEL0137

Electrodo Electroquirúrgico Faca Recta.



ACEL0136

Electrodo Electroquirúrgico Cuchillo Curvado.



ACEL0136

Electrodo Electroquirúrgico Micro Bola 45 °.



ACEL0134

Electrodo Electroquirúrgico Bola Ø 2mm 45 °.



ACEL0019

Electrodo Electroquirúrgico Microaguja
Telagiectasia, Epilación y Coagulación de
Micro Vasos.



Electrodo para la desobstrucción del Ducto Lacrimal

ACEL1507 - Electrodo Electroquirúrgico para
Ducto, Recto Ø 0,9 x 115mm. Vástago Ø 1,8.



Electrodos Aguja

ACEL0221

Electrodo Electroquirúrgico Micro
Incisión de Precisión Curvo.



ACEL0193

Electrodo Electroquirúrgico Micro Incisión Curvo, 45°.



ACEL0228 E ACEL0239

Electrodo Electroquirúrgico Micro
Incisión de precisión Recto. Con 50mm o 75mm.



ACEL0228

Electrodo Electroquirúrgico con
Punta Aislada Microincisión.



ACEL0806

Electrodo Electroquirúrgico Aguja Romba.



ACEL0805

Electrodo Electroquirúrgico Aguja Corta.



Electrodos Bola y Micro Bola

ACEL0133

Electrodo Electroquirúrgico Bola Ø 1mm.



ACEL0135

Electrodo Electroquirúrgico Bola Ø 2mm.



ACEL0139

Electrodo Electroquirúrgico Bola Ø 3mm.



ACEL0138

Electrodo Electroquirúrgico Bola Ø 5mm.



* Vea más Electrodo Bola y Micro Bola en nuestro Catálogo de Electrodo Reutilizables.

Electrodo Fraccionado

ACEL0907

Punta Fraccionada
en Tungsteno
64 Puntas, 8 x 8, Ø 0,2 mm.



Pinzas Bipolares

Pinzas con exclusivo aislamiento
autoclavable y cable bipolar autoclavable.



ACPI0006 o ACPI0009

Pinza Hemostática Bipolar Recta
Autoclavable, con 12cm o 16 cm.



ACPI0005

Pinza Hemostática Bipolar Micro Punta
45° Autoclavable, 10 cm.





Bioclínicos

Bioclinicos de Colombia SAS



www.bioclinicos.com/



3164313786



dir.electrocirugia@bioclinicos.com



Carrera 64 # 96 – 65
Bogotá, colombia